


## OKI B433dn のオートパワーオフの設定変更方法

OKI 社製 B433dn モデルは ECO 機能が搭載されており工場出荷時設定の「自動設定」の場合、4 時間放置で電源が切れてしまいます。

プリンターの電源が切れている状態ですと、InBody からの印刷ができないため、下記の設定変更を行っていただくようお願い申し上げます。

- 1: プリンターをセットし、問題なくプリントアウトまでできる事をご確認ください。
- 2: ディスプレーに『印刷できます』と表示されている事を確認します。
- 3: 操作パネルのスクロールボタン▼を押して「メニュー」を選択し《OK》を押します。  
・装置が節電モードに入っている場合は、《OK》を押し、復帰させます。
- 4: ▼を数回押して、[管理者用メニュー]を選択し、《OK》を押します。
- 5: ▲または▼を使って管理者パスワードを入力し、《OK》を押します。

※管理者パスワードの確認方法

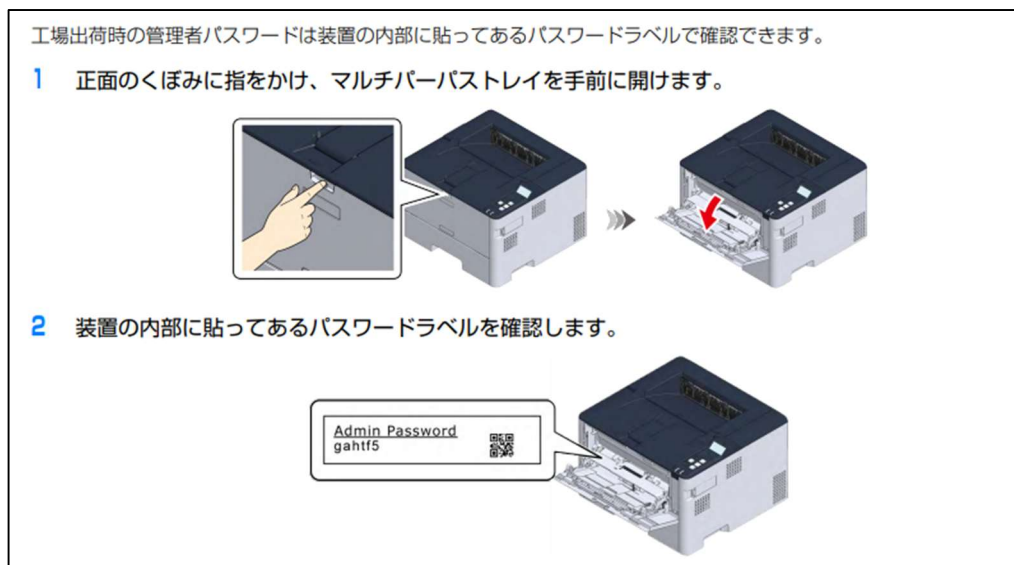

- 6: ▼を数回押して「電力設定」を選択し、《OK》を押します。
- 7: ▼を数回押して「オートパワーオフ」を選択し、《OK》を押します。
- 8: 「この設定を変更するとエネルギー消費が増加する可能性があります。」と表示するので、《OK》を押します。
- 9: ▲または▼を押して、「無効」を選択し、《OK》を押します。  
選択した値の左側に「\*」がついたことを確認します。
- 10: 《キャンセル》を押して、待機画面に戻ります。

以上